




倾倒式废液收集系统解决服务制造商

绿色实验室



安全环保产品 全生命周期服务

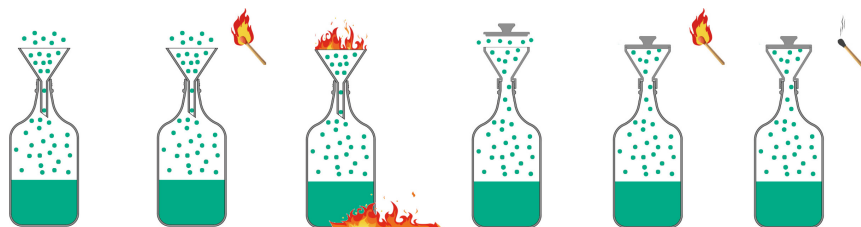

您的实验室存在
以下**安全隐患**么？

- 当化学废液置于敞口废液容器中，易挥发易燃等无色无味有害气体会慢慢逸出到空气中。
- 任何火花、火焰都可能点燃空气中的易燃物质，火焰蔓延到其它区域，造成实验室重大损失。
- 密闭容器中废液的不稳定性和挥发会导致瓶憋气或桶胀，在开启的一瞬间，砰的一声，有害气体大量挥发出来，不仅对您的身体健康有影响，且遇到静电打火或明火，后果不堪设想。
- 二氯甲烷等无色无味有害气体，长期游离在室内空气中，被您和客户通过鼻腔或口腔吸入，造成头晕、恶心等不良反应，往往去医院都无法查明病因。




- 废液安全漏斗，阻止99%有害气体蒸发，消除实验室废液倾倒及存储等安全隐患，有适用于通风柜内及柜外多种款式的安全漏斗废液收集产品供您选择。
- 多种改性活性炭填充的高效排气过滤器吸附过滤有害气体，平衡容器内外气压，防止桶胀，确保下液顺畅，有效防止反气反液等危险情况。
- 远进程报警器可远程电话、短信、微信推送报警，近程蜂鸣报警，提示您及时更换废液容器。



	GL45桶口螺纹参数
	螺纹大经 (mm) $\Phi 44 \leq A \leq \Phi 45$
	螺纹小径 (mm) $B \leq \Phi 42.3$
	螺距 (mm) $C=4$

其它螺纹参数详见末页



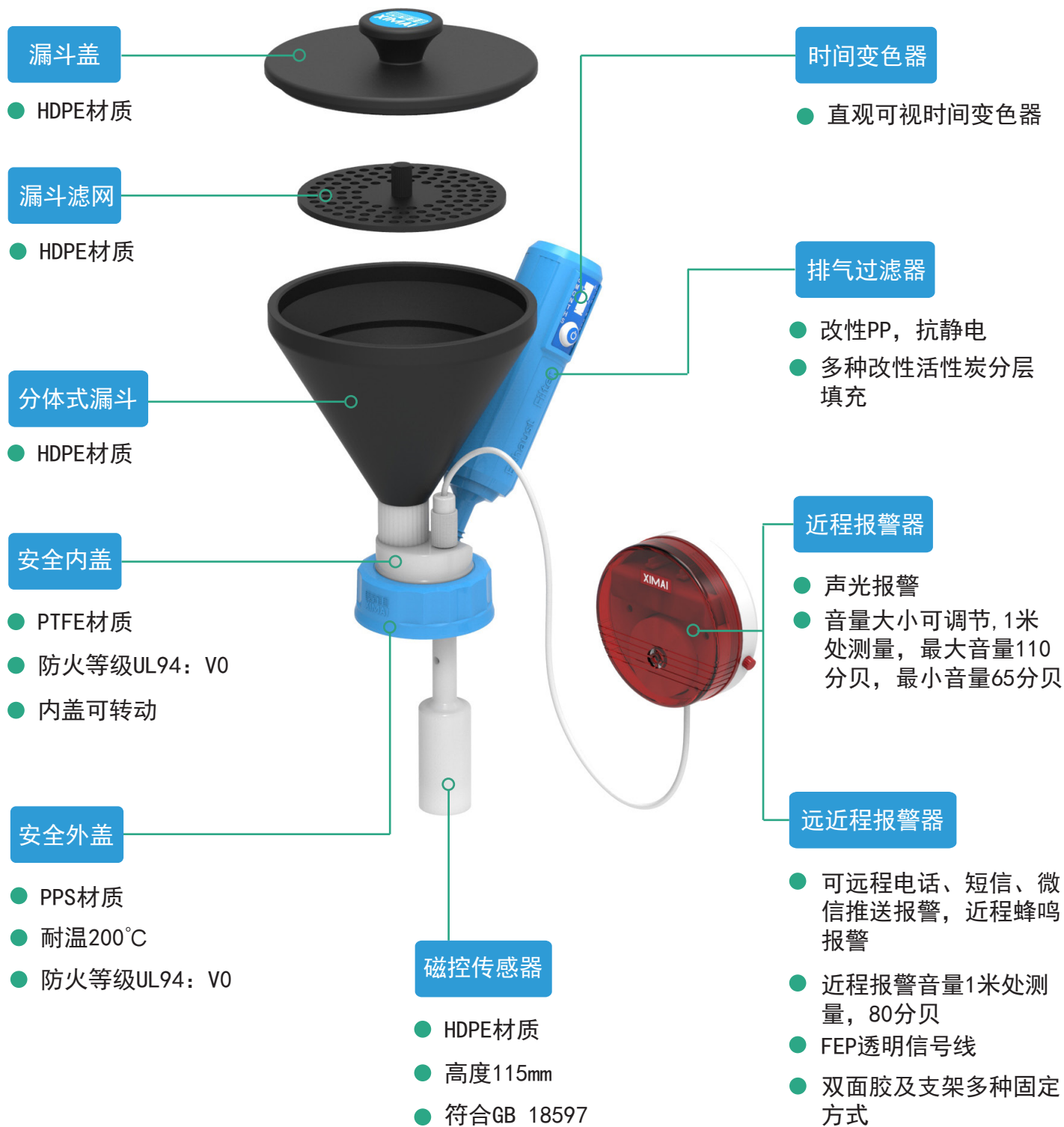




未报警状态



报警状态

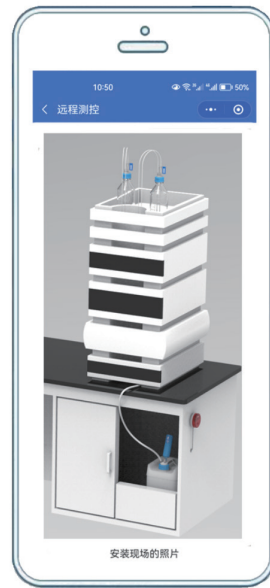

现场照片



安装地址




电话报警




短信报警

- 支持钉钉群和企业微信群报警
- 主要及次要负责人分级权限
- 内置物联网卡，无需连接WiFi
- 报警时间节点开启及关闭功能


- 报警数据记载及导出功能
- 电池电量监测，低电量APP推送
- 蜂鸣器蜂鸣时间控制功能
- APP推送免费，电话及短信报警需付费

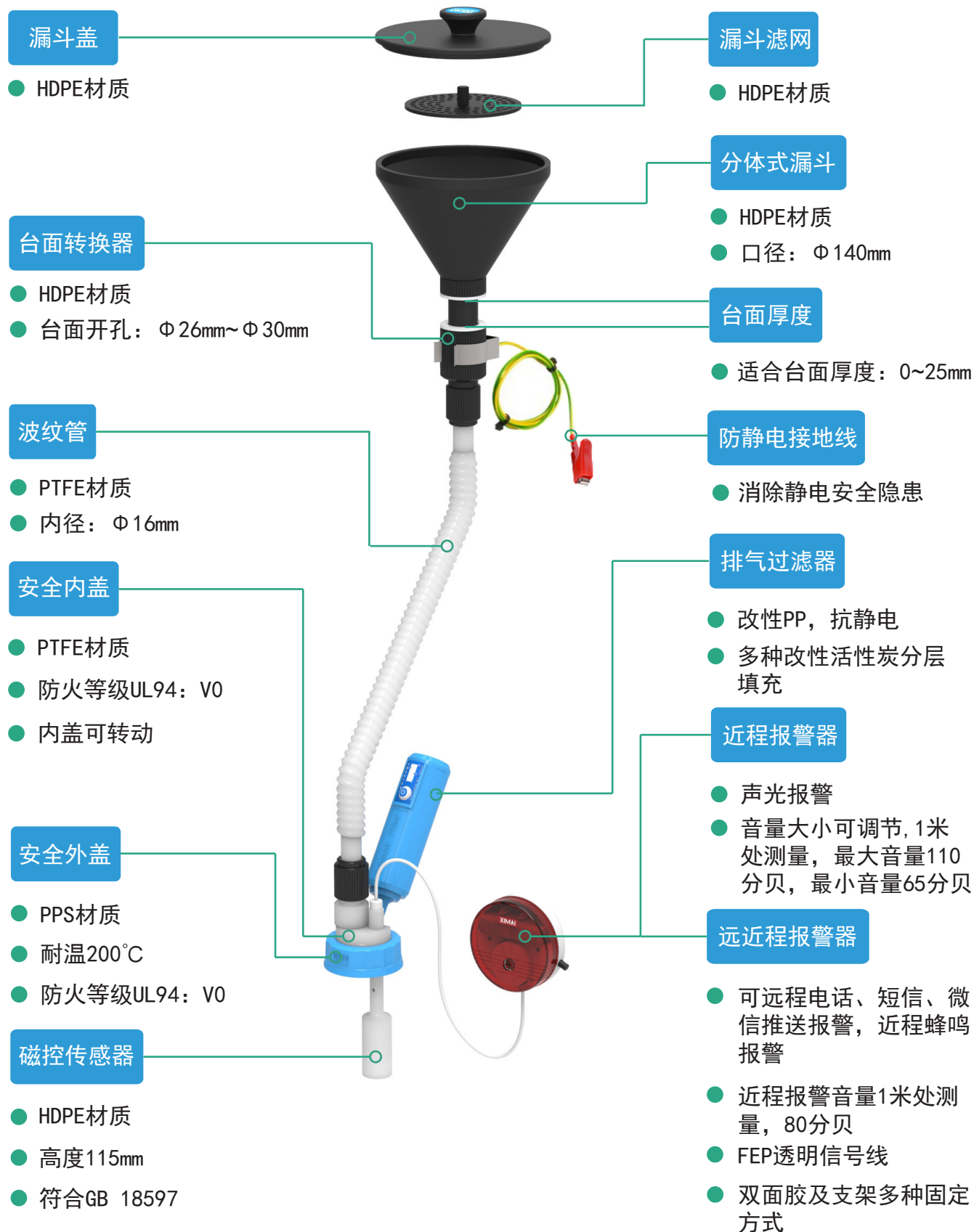

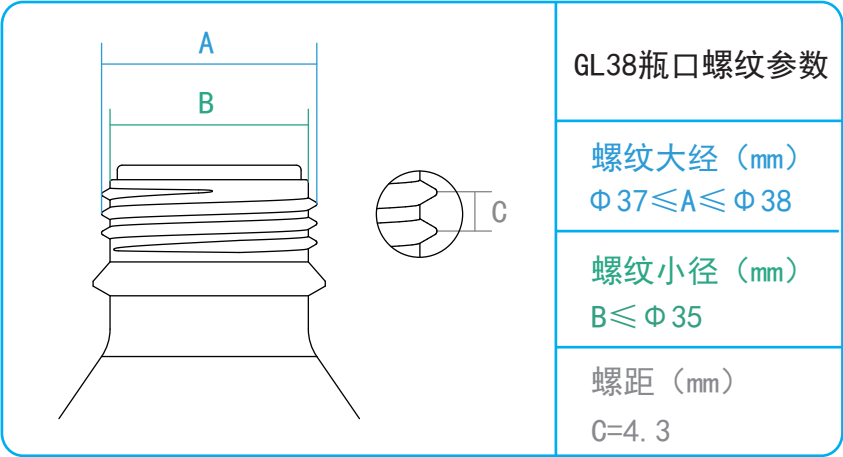


详见第17页

图示	产品编码	产品名称	配置
	XM030101	38一体安全漏斗 I	-1×GL38一体安全漏斗 -1×漏斗滤网 -1×PTFE膜过滤器 -尺寸：Φ110mm×Φ160mm -漏斗上口经：Φ100mm -漏斗下口径：Φ20mm
	XM030102	38一体安全漏斗 II	-1×GL38一体安全漏斗 -1×PTFE膜过滤器 -尺寸：Φ110mm×Φ160mm -漏斗上口经：Φ100mm -漏斗下口径：Φ20mm
	XM030103	38一体安全漏斗 III	-1×GL38一体安全漏斗 -1×漏斗滤网 -1×排气过滤器 -尺寸：Φ110mm×Φ280mm -漏斗上口经：Φ100mm -漏斗下口径：Φ20mm

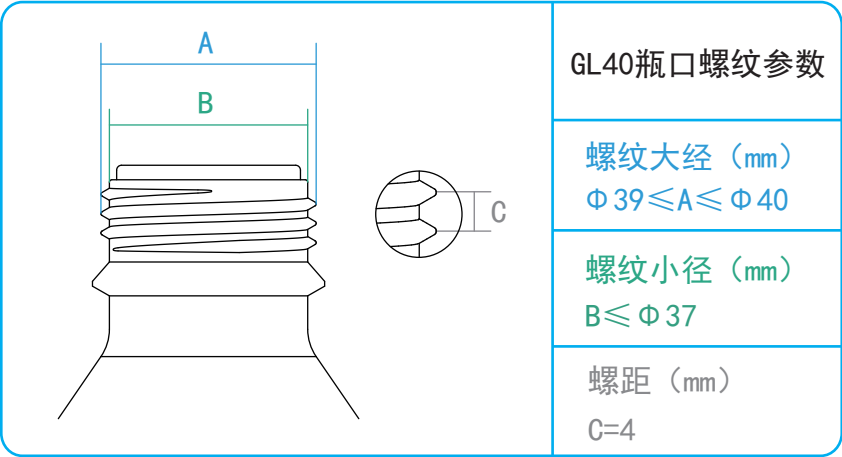



详见第17页

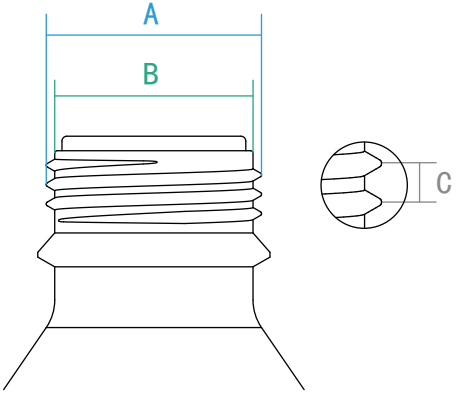
图示	产品编码	产品名称	配置
	XM030201	40一体安全漏斗 I	<div>-1×GL40一体安全漏斗 -1×漏斗滤网 -1×PTFE膜过滤器 -尺寸：Φ110mm×Φ160mm -漏斗上口经：Φ100mm -漏斗下口径：Φ20mm</div>
	XM030202	40一体安全漏斗 II	<div>-1×GL40一体安全漏斗 -1×PTFE膜过滤器 -尺寸：Φ110mm×Φ160mm -漏斗上口经：Φ100mm -漏斗下口径：Φ20mm</div>
	XM030203	40一体安全漏斗 III	<div>-1×GL40一体安全漏斗 -1×漏斗滤网 -1×排气过滤器 -尺寸：Φ110mm×Φ280mm -漏斗上口经：Φ100mm -漏斗下口径：Φ20mm</div>

	GL45桶口螺纹参数
	螺纹大径 (mm) $\Phi 44 \leq A \leq \Phi 45$
	螺纹小径 (mm) $B \leq \Phi 42.3$
	螺距 (mm) C=4





详见第17页

图示	产品编码	产品名称	配置
	XM030301	45一体安全漏斗 I	-1×GL45一体安全漏斗 -1×漏斗滤网 -1×PTFE膜过滤器 -尺寸：Φ 110mm× Φ 160mm -漏斗上口经：Φ 100mm -漏斗下口径：Φ 30mm
	XM030302	45一体安全漏斗 II	-1×GL45一体安全漏斗 -1×PTFE膜过滤器 -尺寸：Φ 110mm× Φ 160mm -漏斗上口经：Φ 100mm -漏斗下口径：Φ 30mm


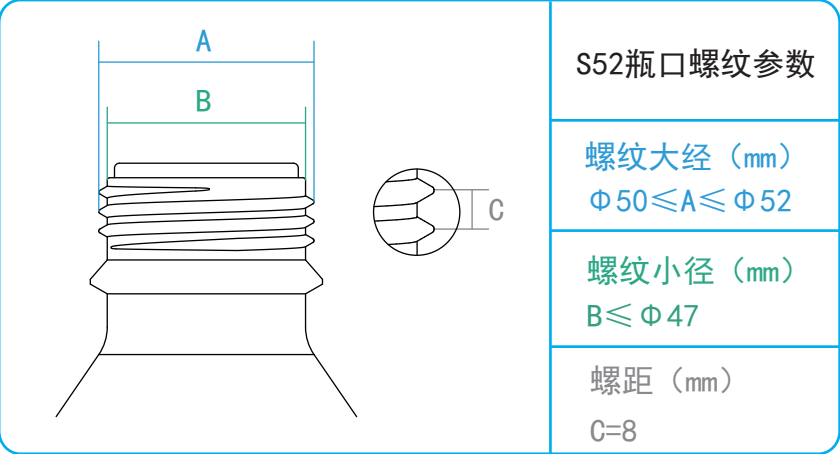


详见第17页

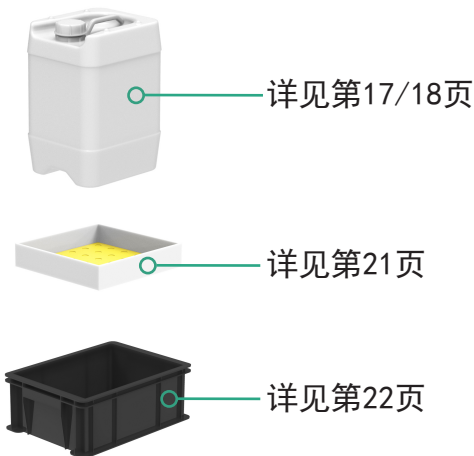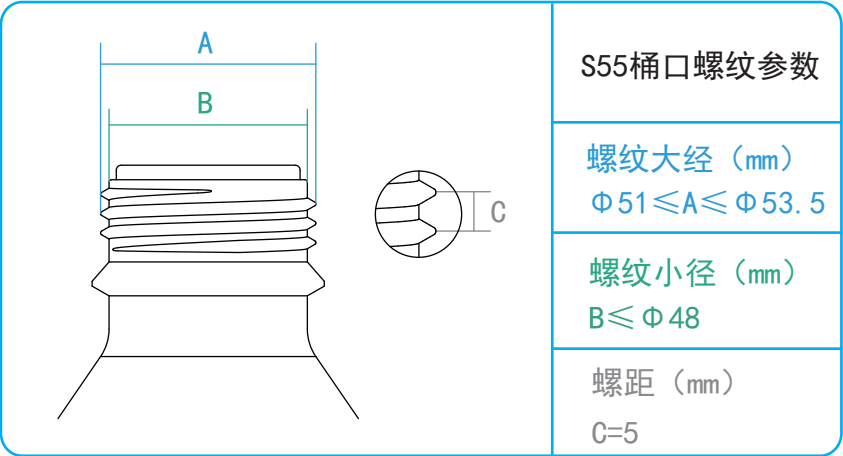

图示	产品编码	产品名称	配置
	XM030501	52一体安全漏斗 I	<ul style="list-style-type: none">-1×S52一体安全漏斗-1×漏斗滤网-1×PTFE膜过滤器-尺寸：Φ110mm×Φ170mm-漏斗上口经：Φ100mm-漏斗下口径：Φ30mm
	XM030502	52一体安全漏斗 II	<ul style="list-style-type: none">-1×S52一体安全漏斗-1×PTFE膜过滤器-尺寸：Φ110mm×Φ170mm-漏斗上口经：Φ100mm-漏斗下口径：Φ30mm
	XM030503	52一体安全漏斗 III	<ul style="list-style-type: none">-1×S52一体安全漏斗-1×漏斗滤网-1×排气过滤器-尺寸：Φ110mm×Φ170mm-漏斗上口经：Φ100mm-漏斗下口径：Φ30mm

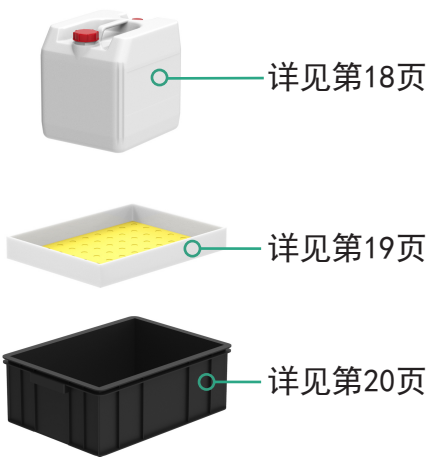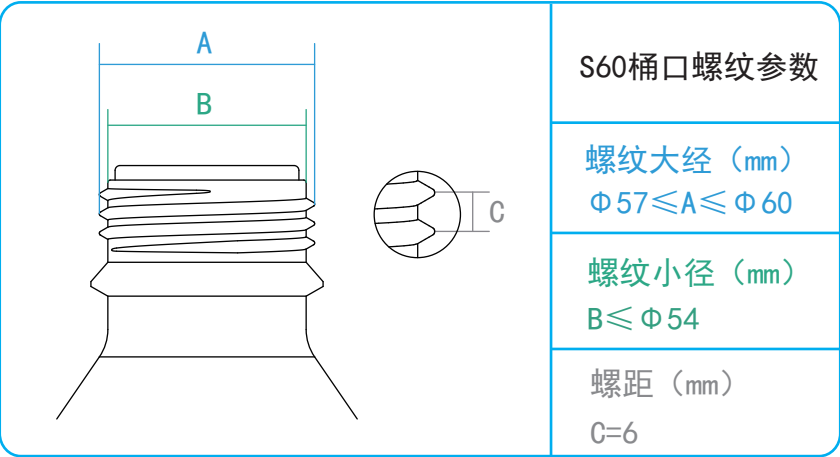


图示	产品编码	产品名称	配置
	XM030601	55一体安全漏斗 I	<ul style="list-style-type: none">-1×S55一体安全漏斗-1×漏斗滤网-1×PTFE膜过滤器-尺寸：Φ110mm×Φ160mm-漏斗上口经：Φ100mm-漏斗下口径：Φ30mm
	XM030602	55一体安全漏斗 II	<ul style="list-style-type: none">-1×S55一体安全漏斗-1×PTFE膜过滤器-尺寸：Φ110mm×Φ160mm-漏斗上口经：Φ100mm-漏斗下口径：Φ30mm
	XM030611	55常规安全漏斗 I	<ul style="list-style-type: none">-1×S55安全漏斗-1×漏斗滤网-1×排气过滤器-漏斗上口经：Φ100mm-漏斗下口径：Φ12mm







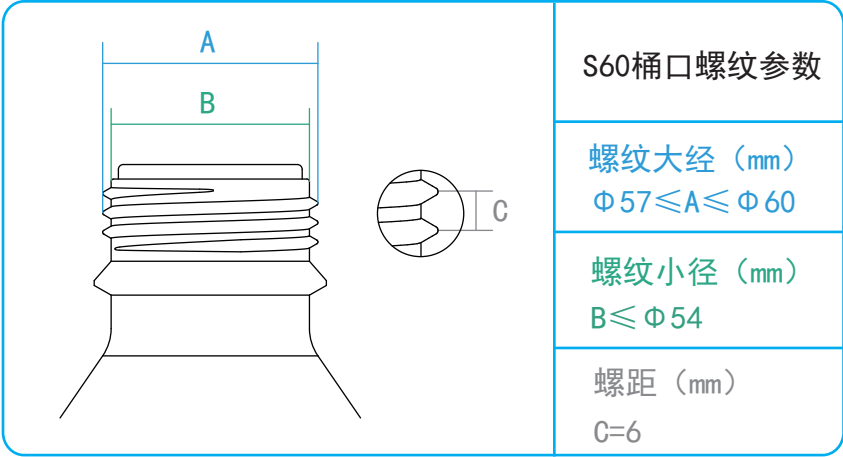




图示	产品编码	产品名称	配置
	XM030701	60一体安全漏斗 I	<div>-1×S60一体安全漏斗 -1×漏斗滤网 -1×PTFE膜过滤器 -尺寸：Φ 130mm× Φ 180mm -漏斗上口经：Φ 120mm -漏斗下口径：Φ 34mm</div>
	XM030702	60一体安全漏斗 II	<div>-1×S60一体安全漏斗 -1×PTFE膜过滤器 -尺寸：Φ 130mm× Φ 180mm -漏斗上口经：Φ 120mm -漏斗下口径：Φ 34mm</div>
	XM030711	60常规安全漏斗 I	<div>-1×S60安全漏斗 -1×漏斗滤网 -1×排气过滤器 -漏斗上口经：Φ 120mm -漏斗下口径：Φ 12mm</div>

图示	产品编码	产品名称	配置
	XM030721	60近程报警 安全漏斗 I	<ul style="list-style-type: none">-1×S60安全漏斗-1×漏斗滤网-1×排气过滤器-1×近程报警器，声光报警，音量大小可调节-漏斗上口经：Φ 120mm-漏斗下口径：Φ 12mm
	XM030731	60远近期报 警安全漏斗 I	<ul style="list-style-type: none">-1×S60安全漏斗-1×漏斗滤网-1×排气过滤器-1×远近期报警器，内置移动物联网卡，远程电话、短信、微信推送报警，近程蜂鸣报警-漏斗上口经：Φ 120mm-漏斗下口径：Φ 12mm







图示	产品编码	产品名称	配置
	XM030741	台面式安全漏斗 I	<div>-1×台面式安全漏斗 -1×漏斗滤网 -尺寸：Φ 150mm× Φ 120mm -漏斗上口经：Φ 140mm -漏斗下口径：Φ 20mm -漏斗螺纹：M32×2</div>
	XM030742	台面式安全漏斗转换器	<div>-台面开孔：Φ 26mm~ Φ 30mm -适合台面厚度：0~25mm -固定漏斗螺纹：M32×2 -固定波纹管螺纹：M26×2</div>
	XM030743	16/21波纹管	<div>-材质：PTFE -尺寸：Φ 16mm× Φ 21mm -长度：默认500mm，可定制 -2×波纹管锁母，M26×2</div>

图示	产品编码	产品名称	配置
	XM030744	台面式安全盖 I	-1×S60内盖及外盖 -1×排气过滤器 -固定波纹管螺纹：M26×2
	XM030745	台面式安全盖 II	-1×S60内盖及外盖 -1×排气过滤器 -1×近程报警器，声光报警，音量大小可调节 -固定波纹管螺纹：M26×2
	XM030746	台面式安全盖 III	-1×S60内盖及外盖 -1×排气过滤器 -1×远近期报警器，内置移动物联网卡，远程电话、短信、微信推送报警，近程蜂鸣报警 -固定波纹管螺纹：M26×2
	XM072602	Φ 40mm接地线	-地线夹开口：15mm -地线长1.5米 -卡管直径：Φ 40mm

图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM070201	排气过滤器	-壳体材质: PP, 抗静电 -表面电阻: $10^6 \sim 10^9 \Omega$ -螺纹规格: GL14 -寿命记录: 6个月, 可视时间变色器
	XM070601	近程报警器	-报警方式: 声光报警 -音量调节: 65分贝至110分贝 -接口螺纹: M10 -信号线: FEP材质, 长度1.5米 -固定方式: 粘接
	XM070602	远近程报警器	-报警方式: 内置移动物联网卡, 远程电话、短信、微信推送报警, 近程蜂鸣报警 -音量: 约80分贝 -接口螺纹: M10 -信号线: FEP材质, 长度1.5米 -固定方式: 粘接
	XM070603	磁控传感器	-螺纹: M12 -材质: HDPE -尺寸: $\Phi 26\text{mm} \times \Phi 120\text{mm}$
	XM072601	$\Phi 25\text{mm}$ 接地线	-地线夹开口: 15mm -地线长1.5米 -卡管直径: $\Phi 25\text{mm}$



图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM050101	38废液容器4L	-螺纹: GL38 -材质: 棕色玻璃 -容积: 4L -尺寸: $\Phi 160\text{mm} \times \Phi 340\text{mm}$
	XM050201	40废液容器4L	-螺纹: GL40 -材质: 棕色玻璃 -容积: 4L -尺寸: $\Phi 160\text{mm} \times \Phi 340\text{mm}$
	XM050301	45废液容器5L	-螺纹: GL45 -材质: HDPE -容积: 5L -尺寸: $175\text{mm} \times 175\text{mm} \times 245\text{mm}$
	XM050302	45废液容器10L	-螺纹: GL45 -材质: HDPE -容积: 10L -尺寸: $245\text{mm} \times 235\text{mm} \times 310\text{mm}$
	XM060501	52废液容器2.5L	-螺纹: S52 -材质: HDPE -容积: 2.5L -尺寸: $\Phi 140\text{mm} \times \Phi 290\text{mm}$
	XM050601	55废液容器5L	-螺纹: S55 -材质: HDPE -容积: 5L -尺寸: $180\text{mm} \times 170\text{mm} \times 255\text{mm}$

图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM050602	55废液容器10L	-螺纹：S55 -材质：HDPE -容积：10L -尺寸：220mm×190mm×320mm
	XM050701	60废液容器20L-A	-螺纹：S60 -材质：HDPE -容积：20L -尺寸：275mm×260mm×380mm
	XM050702	60废液容器20L-B	-螺纹：S60 -材质：HDPE -容积：20L -尺寸：320mm×290mm×300mm
	XM072311	危险废物标识 10cm×10cm	-不干胶 -尺寸：10cm×10cm
	XM072312	危险废物标识 15cm×15cm	-不干胶 -尺寸：15cm×15cm

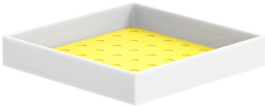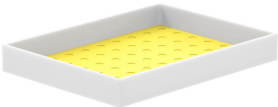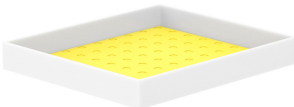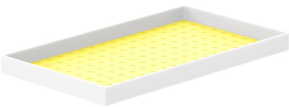图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM060103	45/55防溅液托盘B	-材质：PP -尺寸：300mm×300mm×50mm -1×吸液毡 -适合45/55废液容器10L
	XM060104	60防溅液托盘A	-材质：PP -尺寸：400mm×300mm×50mm -1×吸液毡 -适合60废液容器20L-A
	XM060105	60防溅液托盘B	-材质：PP -尺寸：400mm×350mm×50mm -1×吸液毡 -适合60废液容器20L-B
	XM060106	60防溅液托盘C	-材质：PP -尺寸：700mm×400mm×50mm -1×吸液毡 -适合放两个60废液容器20L-A或20L-B

图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM060151	38/40/45/55 防溅液托盘 I	-材质：PP, 抗静电 -尺寸：355mm×260mm×130mm -容积：9L -1×吸液毡 -适合38/40废液容器4L，45废液容器5L，55废液容器5L
	XM060152	45/55 防溅液托盘 I	-材质：PP, 抗静电 -尺寸：410mm×305mm×150mm -容积：15L -1×吸液毡 -适合45/55废液容器10L
	XM060153	60防溅液托盘 I	-材质：PP, 抗静电 -尺寸：480mm×350mm×170mm -容积：23L -1×吸液毡 -适合60废液容器20L-A和20L-B

利用游标卡尺测量瓶口/桶口外螺纹尺寸，确保安全盖适合您的容器。

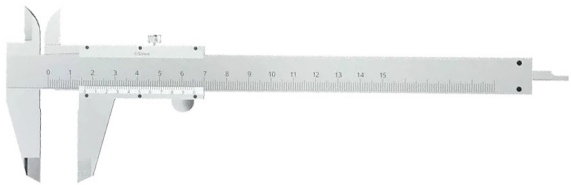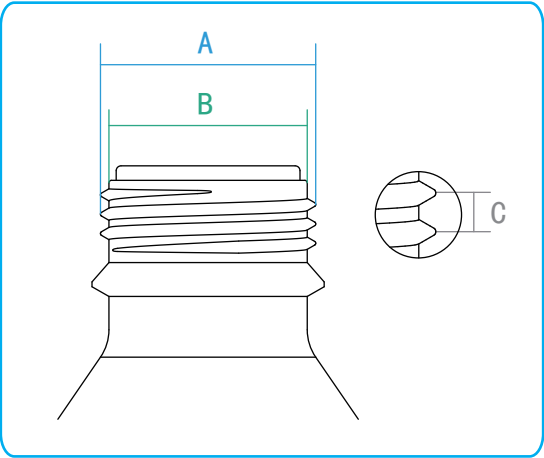

螺纹规格	螺纹大经 (mm)	螺纹小经 (mm)	螺距 (mm)
GL38	$\Phi 37 \leq A \leq \Phi 38$	$B \leq \Phi 35$	$C=4.3$
GL40	$\Phi 39 \leq A \leq \Phi 40$	$B \leq \Phi 37$	$C=4$
GL45	$\Phi 44 \leq A \leq \Phi 45$	$B \leq \Phi 42.3$	$C=4$
S47	$\Phi 45 \leq A \leq \Phi 47$	$B \leq \Phi 43$	$C=4$
S52	$\Phi 50 \leq A \leq \Phi 52$	$B \leq \Phi 47$	$C=8$
S55	$\Phi 51 \leq A \leq \Phi 53.5$	$B \leq \Phi 48$	$C=5$
S60	$\Phi 57 \leq A \leq \Phi 60$	$B \leq \Phi 54$	$C=6$
S65	$\Phi 63 \leq A \leq \Phi 65$	$B \leq \Phi 60$	$C=4$
S80	$\Phi 78 \leq A \leq \Phi 80$	$B \leq \Phi 75$	$C=6$
S83	$\Phi 82 \leq A \leq \Phi 83$	$B \leq \Phi 80$	$C=6$
S100	$\Phi 98 \leq A \leq \Phi 100$	$B \leq \Phi 97$	$C=6$

支持非标瓶口/桶口废液安全盖定制，欢迎您来电咨询。

名称：北京析迈科技有限公司
地址：北京市丰台区航丰路1号院2号楼16层1612室
电话：13240016984
邮箱：contact@pgximai.com
网址：www.pgximai.com.cn